



Cleaning recommendations for your device

DISCLAIMER: The maintenance and respect of the rules of hygiene in the use of this product with your patients are your own responsibility. DIGITSOLE cannot be held liable regarding any suggestions or answers to these questions you may have. They are non-contractual indications. This suggested cleaning protocol does not supersede the cleaning recommendation of the manufacturer of the cleaning agent you are using.



WARNING: Use the insole only with a clean sock.

You can use disposable socks.

It is recommended that the following operations be performed on a regular basis and before the first use:

- Use a disinfectant that meets the following requirements:
 - EN1276*, EN13727*, EN13697*, EN14561 bactericide (including SARM).
 - Mycobacterium Terrae EN14348* and EN14563* tuberculocide.
 - Fungicide EN14562* (on *Aspergillus Fugimatus*).
 - Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* on *Candida albicans*.
 - Virucide EN14476 on HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* and Rotavirus.

**Unless it is very soiled*

- We recommend the STERIMED wipes for the EU which are available from Digitsole at: contact@digitsolepro.com and which meets the requirements. For US customers, the SANI-CLOTH product meets the requirement. It can be purchased through Amazon or your local distributor.

- Allow to air dry before reusing, or wipe dry with a clean, lint-free cloth.




CAUTION

- Do not clean the device with corrosive chemicals, oil, acetone, or petroleum-based products.
- Do not place the device in a washing machine, dryer, use a hand dryer, or other piece of equipment.
- Avoid immersing the device in water.

CLEANING PROTOCOL

After use by the patient:

- Use a clean disposable paper towel and put some disinfectant spray on it or use cloths.
Please follow the requirements given by the product manufacturer, you can find it on the directions of the product.
- Pass the paper towel, or the cloth on the top and the bottom of the insoles
- To dry the insoles, there are two options:
 - Air dry
 - Use a clean disposable absorbent paper towel and wipe the top and the bottom of the insoles

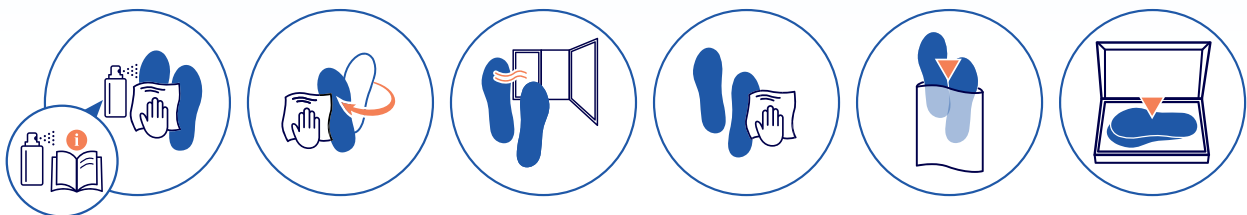

*** Optional if you want to provide additional sanitation:**

- Put the insoles in a clean and airtight bag before placing them in their box
- Store the insoles in the box provided for this purpose



Instructions de nettoyage pour votre appareil

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le maintien et le respect des règles d'hygiène dans l'utilisation de ce produit avec vos patients sont de votre propre responsabilité. DIGITSOLE ne peut être tenu responsable des suggestions ou réponses aux questions que vous pourriez avoir. Ce sont des indications non contractuelles. Ce protocole de nettoyage suggéré ne remplace pas la recommandation de nettoyage du fabricant de l'agent de nettoyage que vous utilisez.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez les semelles uniquement avec des chaussettes propres.

Vous pouvez utiliser des chaussettes jetables.

Il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes régulièrement et avant la première utilisation :

- Utilisez un désinfectant qui répond aux exigences suivantes :
 - Bactéricide EN1276*, EN13727*, EN13697*, EN14561 (y compris SARM).
 - Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* tuberculocide.
 - Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus).
 - Lévuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans.
 - Virucide EN14476 sur VHB, VHC, Adénovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* et Rotavirus.

**Sauf si très sale*

- Nous recommandons les lingettes STERIMED pour l'UE qui sont disponibles chez Digitsole à : contact@digitsolepro.com et qui répond aux exigences. Pour les clients américains, le produit SANI-CLOTH répond aux exigences. Il peut être acheté via Amazon ou votre distributeur local.

- Laisser sécher à l'air libre avant de réutiliser ou essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux.


⚠ MISE EN GARDE

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques corrosifs, de l'huile, de l'acétone ou des produits à base de pétrole. Ne placez pas l'appareil dans une machine à laver, un sèche-linge, n'utilisez pas de sèche-mains ou tout autre équipement. Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.

PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Après utilisation par le patient :

- Utilisez une serviette en papier jetable propre et vaporisez dessus un spray désinfectant ou utilisez des chiffons. Veuillez suivre les exigences données par le fabricant du produit, vous pouvez les trouver sur la notice d'utilisation du produit.
- Passez le papier absorbant, ou le chiffon sur le haut et le bas des semelles
- Pour sécher les semelles, il y a deux options :
 - Sécher à l'air libre
 - Utilisez une serviette en papier absorbant jetable propre et essuyez le haut et le bas des semelles

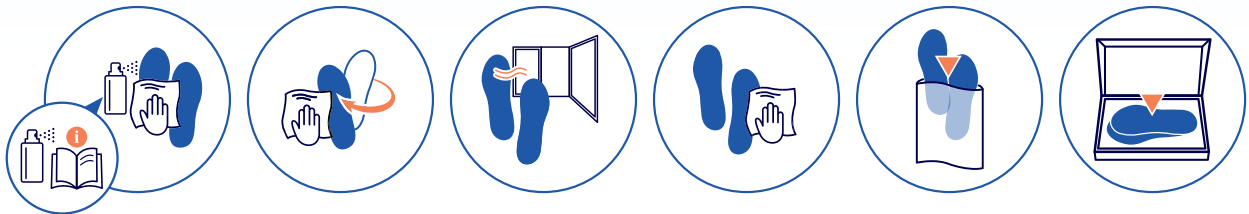

*** Facultatif si vous souhaitez prévoir un assainissement supplémentaire :**

- Mettez les semelles dans un sac propre et hermétique avant de les placer dans leur boîte
- Rangez les semelles dans la boîte prévue à cet effet